

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## REDUTOR-DEBITÓMETRO EASYCARE

### MODELO

EASYCARE

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento n.º745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 10524-1

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIb
- **REF. FABRICANTE:** 940XX


### DESCRIÇÃO

Os redutores de pressão da série EASYCARE são dispositivos médicos adequados para a montagem direta na garrafa e possuem uma estrutura particularmente compacta e ligeira com um debitómetro integrado de orifícios calibrados e uma tomada de gás (dispositivo opcional).

São dispositivos particularmente indicados para oxigenoterapia e são fabricados com redução de pressão em dois andares, com ligação de entrada para os vários tipos de gás e com ligação de saída com rosca adequada às diferentes aplicações necessárias.

Com um único manómetro de controlo, para visualizar o conteúdo do cilindro, os redutores da série EASYCARE têm o corpo em latão cromado, alumínio anodizado e policarbonato, e estão equipados com válvula de segurança pré-calibrada. A estrutura de pequenas dimensões e a configuração técnica particular permite que os redutores de pressão EASYCARE possam fornecer com extrema precisão fluxos de gases medicinais mesmo nas condições mais adversas, como nas unidades móveis de emergência.




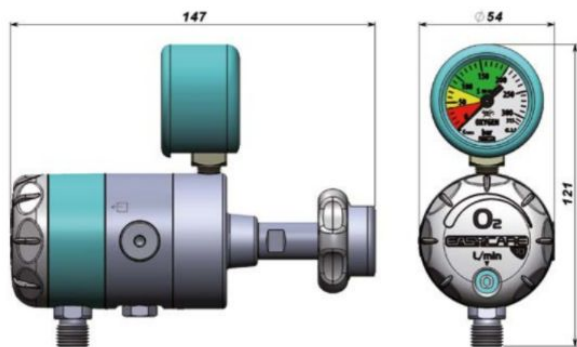

### CONFIGURAÇÃO

Pressão de alimentação: 200 bar máximo  
 Pressão máxima de entrada: 200 bar  
 Precisão do debitómetro:  $\pm 10\%$  da leitura ou  $\pm 0,5$  L/min ( $\pm 0,2$  L/min para caudal < 1 L/min), o que for maior.  
 Todos os componentes são livres de C.V.P. e látex natural.

- Conexão à garrafa, apertado à mão
- Escala manométrica 0-315 bar
- Sistema de redução de pressão em duas fases com pistão
- Válvula de segurança de pressão pré-ajustada a 7 bar
- Ligaç o lateral para tomada opcional

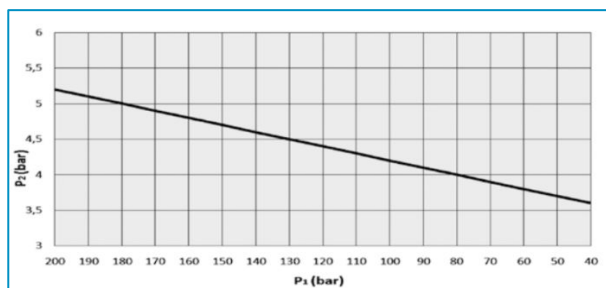

Os debitómetros EASYCARE est o dispon veis com 2 variantes de fluxo:

#### FLUXOS MEDIOS

Escala 0-14 L/min, debitos ajustaveis:  
 0-0.5-1-2-4-6-8-10-12-14 L/min

#### FLUXOS ALTOS

Escala 0-30 L/min, debitos ajustaveis:  
 0-1-2-4-8-12-12-16-20-25-30 L/min

## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CODIGO	DESIGNAÇÃO	GAS	TIPO VALVULA	TIPO TOMADA
156967	EASYCARE10 (O2) 15L NF 12X125	O2	F	AFNOR
156968	EASYCARE10 (AIR) 15L NF 12X125	AR	D	AFNOR

## ACESSORIOS

CODIGO	DESIGNAÇÃO	UND. VENDA	REF FT
16532	KIT DE SAIDA N2	1	FT Aces HBS
84850	OLIVA SAIDA 9/16" METAL 230152 (x10)	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAIDA 9/16 (x10)	10	FT034A - PT
168302	OLIVA SAIDA 12x125 (x10)	10	FT034A - PT
168348	JUNTA TORICA R5 SILICONE ROSE (x10)	10	FT034A - PT