

## ACESSÓRIOS ASPIRAÇÃO FLOVAC

### MODELO

FLOVAC

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe I
- **REF. FABRICANTE:** Várias

### DESCRIÇÃO

Os recipientes descartáveis FLOVAC são dispositivos médicos utilizados para a recolha de fluidos orgânicos em sistemas de aspiração e são concebidos e fabricados para aplicações de "Alto Fluxo e Alto Vácuo".

Este sistema combina simplicidade e praticidade na utilização, garantindo a máxima segurança contra a contaminação tanto para os operadores, como para o equipamento de sucção e o ambiente. Os recipientes estão disponíveis em três tamanhos (1, 2 e 3 litros) e em duas versões diferentes:

- **Versão REUTILIZÁVEL:** constituída por um recipiente rígido de suporte reutilizável e um sistema de recolha descartável constituído por um saco hermeticamente fechado à tampa;
- **Versão CANISTER:** sistema inteiramente descartável constituído por um recipiente rígido e uma tampa a ser hermeticamente selada à mesma.

O sistema FLOVAC tem o Filtro anti-bacteriano hidrofóbico GORE™ Medical Membrane. Além de parar a sucção quando o nível máximo permitido é atingido, o filtro de membrana garante a protecção bacteriana do sistema de vácuo hospitalar, com eficiência quase absoluta.

Todos os componentes são livres de C.V.P. e látex natural.



1




2

### CARACTERÍSTICAS FLOVAC

- Material de cobertura: HPDE (polietileno de alta densidade)
- Conector VÁCUO: fêmea cônica
- Conector PACIENTE: Ø 14-15,5mm (Ø 8-9,2mm com conector angular)
- Conector TANDEM: Ø 8-9.2mm
- Valor máximo de sucção: -750 mbar
- Valor máximo do caudal: 42 LPM
- Gama máxima de graduação: 50 ml
- Tamanho da mangueira do paciente: Interno Ø ≥ 6 mm (recomendado Ø 6x9 mm L=2,5 m MAX)
- Dimensões do tubo de alimentação: Ø interno ≥ 6 mm (L=1,8 m MAX)
- Prazo de validade do produto: 5 anos a partir da data de fabrico

### FILTRO ANTI-BACTERIANO HIDROFÓBICO

- Material do pré-filtro: Microfibras vidro
- Apoio: "Woven-non-woven" PE/ PES
- Membrana: GORE™ Membrana Médica PTFE 100% expandido
- Também resistente à espuma e aos fumos
- Capacidade de filtragem (típica): 99,999995% com 0,1 µ de partículas

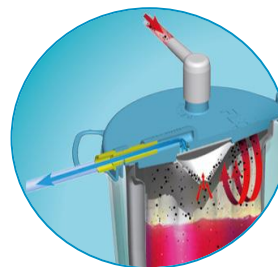

### GAMA DE PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UND. VENDA	LEGENDA
169392	SACO FLOVAC 1L (50 UD)	50	1
169393	SACO FLOVAC 2L (50 UD)	50	1
169394	SACO FLOVAC 3L (50 UD)	50	1
110858	FRASCO REUTILIZÁVEL FLOVAC 1L (x15)	15	3
110859	FRASCO REUTILIZÁVEL FLOVAC 2L (10 UD)	10	3
110860	FRASCO REUTILIZÁVEL FLOVAC 3L (x5 und)	5	3
110707	CANISTER FLOVAC 1L (60 UD) - uso único	60	2
110708	CANISTER FLOVAC 2L (50 UD) - uso único	50	2
110709	CANISTER FLOVAC 3L (30 UD) - uso único	30	2
118697	ARO PARA FLOVAC COM PLACA 30X5	1	4
110857	ARO PARA FLOVAC COM PLACA 25X5	5	4
162786	RACCORD ENTREE POUR FLOVAC (x25 und)	25	5
162787	TUBO 0,38m+RACCORD POUR FLOVAC (x 50 und)	50	-
118703	SUPORTE PAREDE FLOVAC - 30X5 mm	1	6
69418	SUPORTE PAREDE PLASTICO (ABS) 25X5	1	6
110769	TROLLEY PARA FLOVAC - 4 POSTOS	1	7
168399	TUBO SILICONE PARA ASPIRAÇÃO 6x12 MM (25M)	1	-



3



4



5



6



7