

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipamentos

CALHAS TÉCNICAS TLV COCOON

MODELO

Cocoon

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485
- DIRETIVA 93/42/EEC
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIb

DESCRIÇÃO

A calha COCOON é ideal para todo o tipo de instituição de saúde. A qualidade da luz promove o conforto e o bem-estar dos pacientes e dos profissionais de saúde.

Design & Ergonomia

A configuração da Cocoon separou o espaço do paciente da atmosfera médica. A mesa de cabeceira integrada na unidade de cabeceira da cama é suspensa para facilitar a limpeza do chão. Está incluída uma gaveta ergonómica para facilitar o acesso, quando o paciente está deitado.

Inovação

Disponível em versão LED, a unidade de iluminação de parede LYSA tem um sistema óptico eficiente e confortável para pacientes e pessoal hospitalar. A integração, como opção, de iluminação dinâmica simulando um ciclo de luz de 24 horas, será útil para o bem-estar do paciente.




GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	INSTALAÇÃO
113100	Cocoon	UCC

CONFIGURAÇÃO

Lado da enfermeira

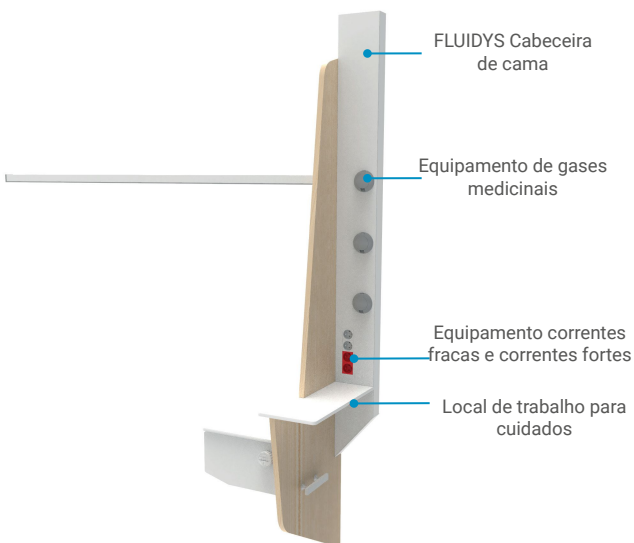


Lado do paciente

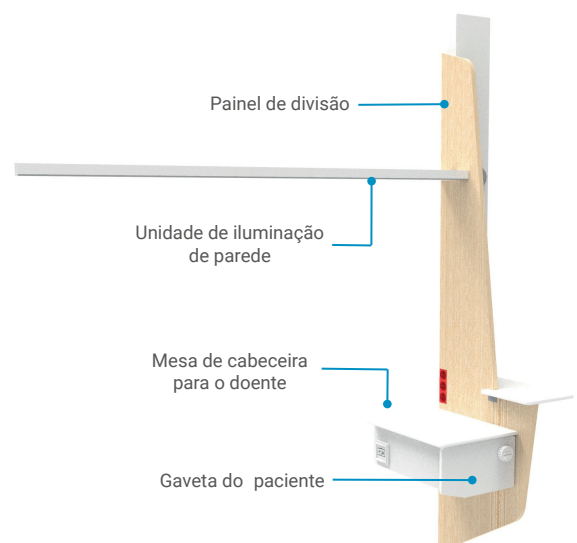

ESTUDO DA ILUMINAÇÃO

- Sala padrão
- Dimensões da sala: 3m x 3 m, espaço livre do tecto 2,5 m
- Coeficientes de reflexão: tecto 7, paredes 5, e chão 3
- Coeficiente de depreciação 0,83

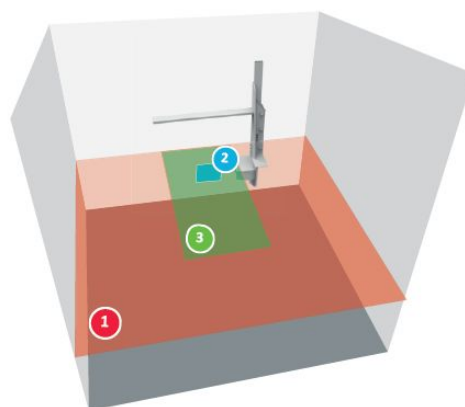

Iluminação geral




Plano de iluminação geral virtual de uma superfície igual para o da sala, localizado 0,85 m acima do chão (3 m x 3 m para um quarto individual).

Iluminação de leitura

Plano de leitura virtual 0,3 m x 0,3 m inclinado a 75° localizado a 1,1 m do chão e a 1 m da parede onde se encontra a unidade.

Iluminação de cuidado

Plano de exame virtual 2 m x 0,9 m localizado 0,85 m do chão, centrado em largura e 0,1 m da parede.

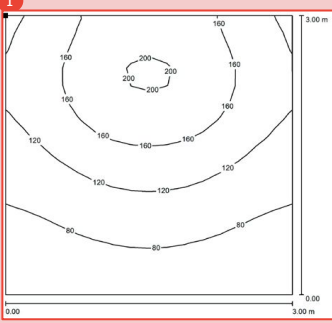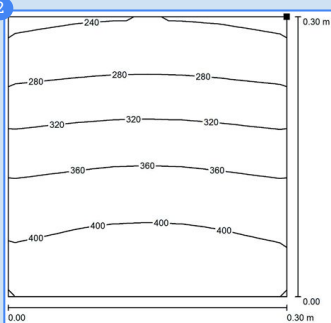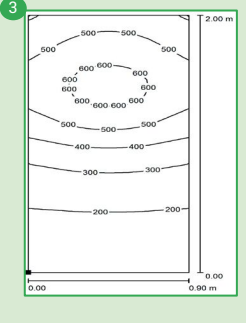	Módulo 4 Ft	Módulo 2 Ft	Iluminação geral e de leitura combinada
LED			
Consumo	33,2 W	10,8 W	44 W
Iluminação média	125 lx	353 lx	397 lx

Aconselha-se a leitura cuidadosa da rotulagem e instruções de utilização e outros elementos de segurança do equipamento antes da sua utilização.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France