

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipamentos

CALHAS TÉCNICAS TLV TECH-CARE AUTOLIFT & ERGOFIX

MODELO

Tech-Care Autolift & Ergofix

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- EN ISO 9001 and EN ISO 13485
- DIRETIVA 93/42/EEC
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIb

DESCRIÇÃO

Os braços suspensos da gama TECH-CARE *Autolift* e *Ergofix* satisfazem a maioria dos requisitos dos profissionais de saúde e proporcionam harmonia e segurança ao elevar e transportar dispositivos biomédicos e acessórios (tais como carrinho de endoscopia, ventilador, e aparelho de anestesia). A versão motorizada do braço Autolift permite elevar equipamento de forma rápida e sem esforço.


A sua configuração técnica e ergonómica personalizada proporciona modularidade e um raio de movimento de 40 a 315°. A flexibilidade dos braços permite o acesso ao paciente, organização da área, e a limpeza das áreas de tratamento.

O pendente de teto TECH-CARE permite um deslocamento horizontal de 500 a 2000 mm, de acordo com a configuração. A sua versão motorizada permite um curso vertical de 680 mm. A sua versão standard está equipada com um sistema de travagem mecânico de rotação por fricção, e está disponível um sistema opcional de travagem electropneumática ou electromagnética. As novas caixas são concebidas para serem ergonómicas e de fácil utilização para todas as equipas de assistência. Distribuem gases medicinais correntes fracas e correntes fortes.



GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	INSTALAÇÃO
113100	Tech-Care Autolift & Ergofix	UCI / B.O /Gastro

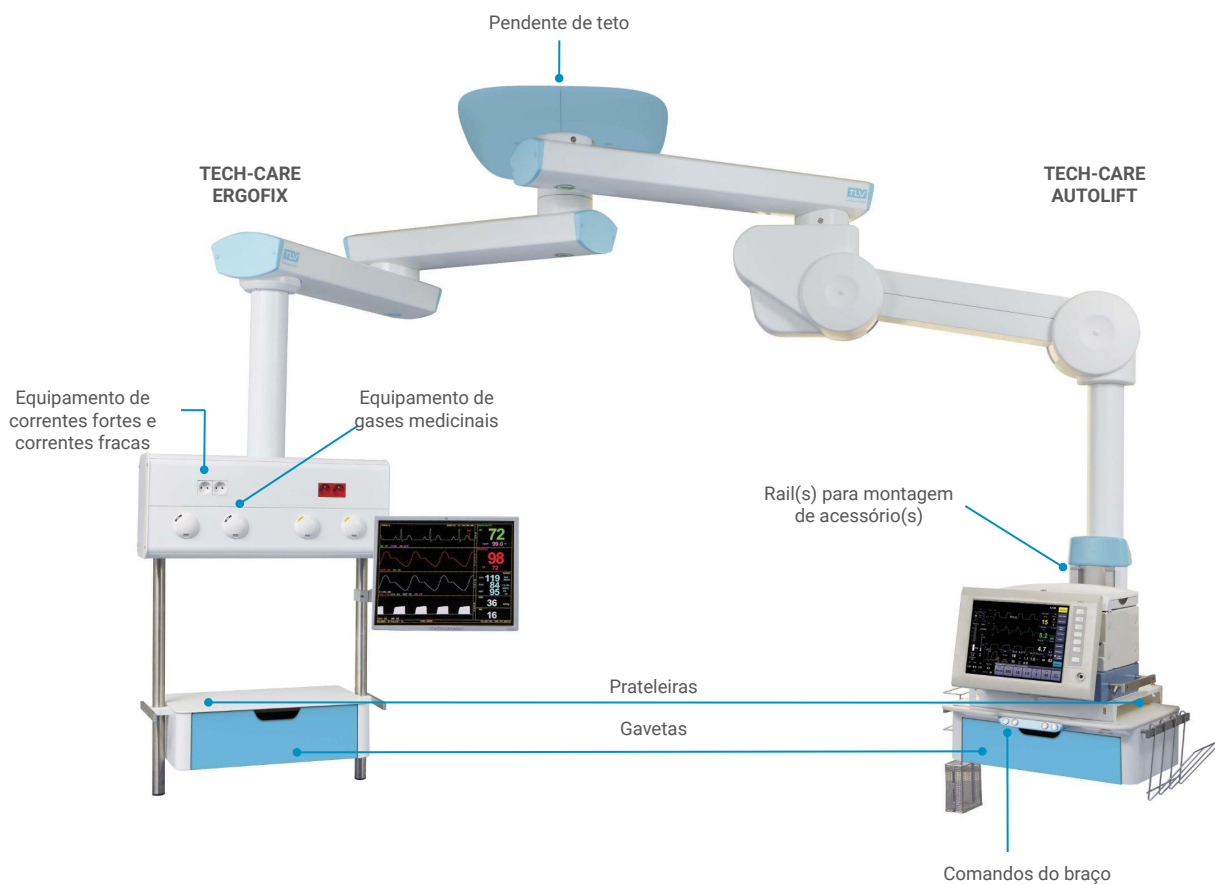

CONFIGURAÇÃO MONO

Configuração mono, braço único, caixa vertical



Configuração mono, braço duplo, caixa vertical



Configuração mono, braço motorizado único, caixa vertical



Configuração mono, braço motorizado duplo, caixa vertical



Configuração coluna vertical




CONFIGURAÇÃO DUO

Configuração duo, braço simples com caixa vertical, braço simples motorizado com caixa vertical



Configuração duo, braço duplo com caixa vertical, braço duplo motorizado com caixa vertical

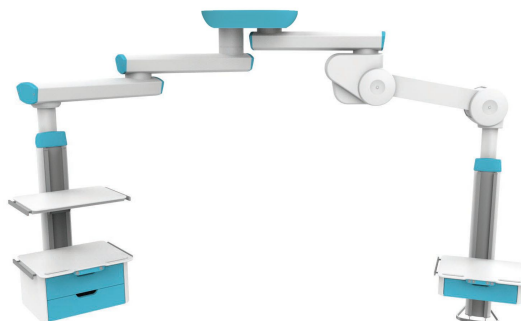

Configuração duo, braço duplo com caixa vertical, coluna vertical



Configuração duo, braço duplo: caixa vertical, caixa horizontal



Configuração duo, braço único: caixa vertical, caixa horizontal



Aconselha-se a leitura cuidadosa da rotulagem e instruções de utilização e outros elementos de segurança do equipamento antes da sua utilização.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France